

XO[®] 4-1

Quick Guide

Slå på/av din XO 4 med hjälp av den gröna strömbrytaren på stativets baksida.

För att aktivera instrumentet lyfter du det från sin plats på instrumentbryggan. Du reglerar instrumentet med XO Fotkontroll, se nästa sida.

När alla instrument är på plats styr XO Fotkontroll och XO Joystick stolen och uniten.

Styr fontänen manuellt antingen med  eller med XO Fotkontroll .

Aktivera **vattenglaspåfyllning** med  för att fylla på vatten.



Knapparna  och .

Sugen startat automatiskt när slangen lyfts från sughållaren.



XO OP-belysning styrs via sensorn under lamphuvudet utan att du behöver vidröra den: Håll handen inom aktiveringsområdet i mindre än en sekund för att slå på/av lampan. Håll kvar handen längre än en sekund för att justera ljusstyrkan.


Använd  för att **tillkalla din assistent**.




"No touch"-sensor.

Stol och unit

Flytta **XO 4 Patientstol** till position 1 med  och till position 2 med .


Stolen går till sköljposition när  aktiveras första gången.

Stolen går till i/urstigningsläge när  aktiveras andra gången.


Om du aktiverar  två gånger inom 1 sekund går stolen direkt till i/urstigningsläge.

Gå till den "last position" med hjälp av .

Stolens nödstopp: Vidrör valfri knapp (förutom ) på XO Fotkontroll eller XO Joystick för att omedelbart stoppa stolen.

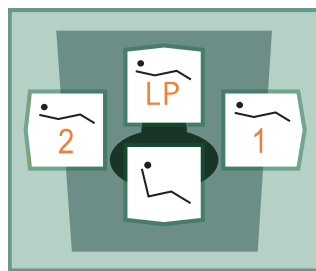

XO Joystick på stolbasen.

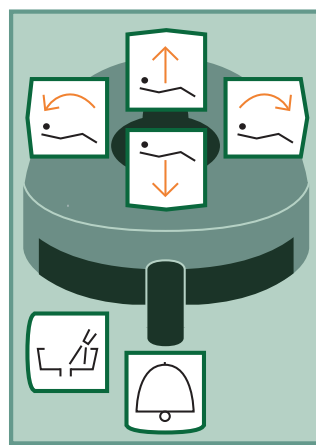




XO Fotkontroll.

-  1 Arbetsposition 1
-  2 Arbetsposition 2
-  En gång: sköljposition
Två gånger: i/urstigningsläge
-  LP "Last position"
-  ↑ Höj stolen
-  ↓ Sänk stolen
-  → Höj ryggstödet
-  ← Sänk ryggstödet
-  Kalla på din assistent
-  Starta/stoppa rundspolning
-  Starta/stoppa vattenglaspåfyllningen

Micromotor

Aktivera micromotorn genom att lyfta den. Reglera den med XO Fotkontroll.


Kör motorn inom 250-40.000 rpm motsols med  eller medsols med .

Ändra sprayval med : vatten & luft, bara luft eller ingen spray (s.k. "chip blow").

Turbin

Aktivera turbinen genom att lyfta den. Reglera den med XO Fotkontroll.

Slå på/av turbinen med  eller .

Ändra sprayval med : vatten & luft eller ingen spray.

Scaler

Aktivera scalern genom att lyfta den. Reglera den med XO Fotkontroll.

Starta/stoppa instrumentets oscillering med  eller .

Slå på/av sprayvatten med .



Välj mellan tre vattmängdnivåer :

Höj nivå med .

Sänk nivå med .

Displayen visar aktuell effektinställning :

-  Minimnivå
-  Medelnivå
-  Maximnivå

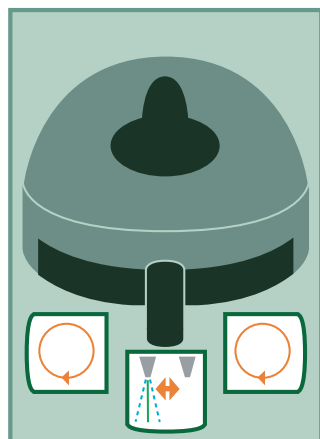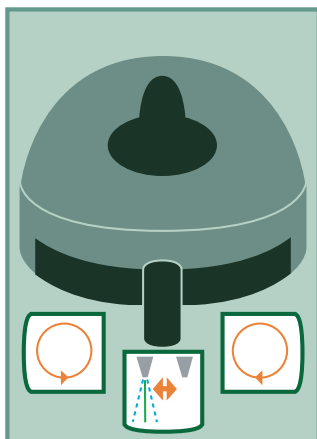

Härdljus

Lyft fram härdljuset och styr det med XO Fotkontroll.

Exponeringstiden är förinställd på 20 sekunder.

Starta härdningsprocessen med  eller .

Ett pip hörs var tionde sekund.

Intraoral videokamera





Till skillnad från resten av enhetens instrument kan du använda videokameran även när ett annat instrument är aktivt.


Lyft fram kameran för att se videobilden på skärmen.

Styr videokameran via fotkontrollen så länge inga andra instrument är aktiva.

Växla mellan läge "still" och "live" med hjälp av .

Obs! Funktionen "still" kräver installation av programvara på ansluten PC.

	Luft- och vattenspray
	Vattenspray
	Luftspray
	Varken luft- eller vattenspray

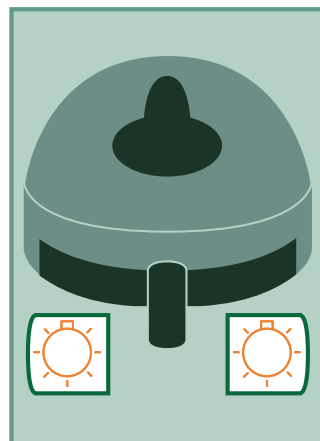

	Påbörja rotation medsols
	Påbörja rotation motsols
	Sprayval
	Slå på/av tandrengöringsinstrumentet
	Irrigation on/off Scaler
	Höj maxeffekten - tandrengöringsinstrumentet
	Minska maxeffekten - tandrengöringsinstrumentet
	Slå på härdljuset
	Växla mellan "still-/"live"-bild - videokameran

Underhåll

Infektionkontrollrutiner

Om XO Fotkontroll glider på golvet när den aktiveras:

Rengör gummifötterna under fotkontrollen med kemiskt ren bensin.

På morgonen innan första patienten

1. Slutför desinfektionsproceduren för vattenledningarna:
 - Kontrollera att alla instrument fortfarande sitter i fontänens instrumenthållare
 - Slå på uniten
 - Unitens vattenledningar spolas automatiskt med desinfektionsvätska
 - Se status på displayen

2. Sätt på steril(-a) desinfikerad(-e)/ny(-a):
 - Instrumentpanel
 - Instrument
 - Kopp
 - Handtag på instrumentbrygga, lampa och skärm
 - Sugfilter och skydd för sugnipplar



Efter varje patient

1. Avlägsna kontaminerad(-e):
 - Instrument
 - Instrumentpanel
 - Kopp
 - Handtag på instrumentbrygga, lampa och skärm

2. Rengör och desinfektera ytorna

3. Sätt i steril(a)/desinfikerad(e)/ny(a):
 - Instrumentpanel
 - Enhetsinstrument
 - Kopp
 - Handtag på instrumentbrygga, lampa och skärm


På kvällen efter den sista patienten

1. Desinfektera sugsystemet:
 - Aktivera 
 - Sätt på båda sugslangarna på desinfektionsnipplarna
 - Aktivera 
 - Se statusen på displayen

2. Avlägsna kontaminerad(-e):
 - Instrument
 - Instrumentpanel
 - Fontänskål, "guldfång" och kopphållare (vrid undan fontänkranen innan du flyttar fontänskålen)
 - Handtag på instrumentbrygga, lampa och skärm
 - Sugfilter och skydd för sugnipplar

3. Rengör och desinfektera unit- och stolsytor

4. Sätt i desinfikerad:
 - Fontänskål, "guldfång" och vattenglaspåfyllaren (när du har placerat fontänskålen vrider du tillbaka fontänkranen till dess rätta position)

5. Starta desinfektionsproceduren för vattenledningarna:
 - Placera alla enhetens instrument i fontänens instrumenthållare
 - Tryck på  för att tömma expansionsbehållaren
 - Slå av enheten och låt alla instrument sitta kvar i fontänens instrumenthållare




Desinfektering av vattenledningar.



Sugslangar på desinfektionsnipplar



Fontänskålen är löstagbar för att kunna diskas.

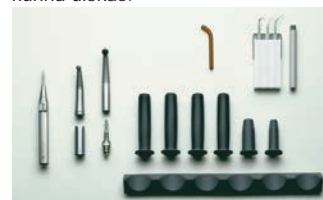

XO 4-delar som kan autoklaveras (+134°C)



Delar som kan rengöras i diskdesinfektor.



Rengör gummifötterna under XO Fotkontroll regelbundet med kemiskt ren bensin.

XO[®]

XO CARE A/S
Usserød Mølle
DK 2970 Hørsholm
Denmark
+45 70 20 55 11
info@xo-care.com
www.xo-care.com