



# ΧΟ® 4-1


## Quick Guide

Ανοίξτε/κλείστε το ΧΟ 4 με τον πράσινο κεντρικό διακόπτη.

Όταν σηκωθεί ένα από τα κοπτικά εργαλεία ελέγχονται από τον ΧΟ ποδοδιακόπτη – δείτε επόμενη σελίδα.

**Με τα κοπτικά εργαλεία σε αρχική θέση** ελέγχονται οι λειτουργίες της ΧΟ 4 έδρας και καρέκλας με τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη και ΧΟ Χειριστήριο.

Ενεργοποίηση του πτυελοδοχείου χειροκίνητα είτε με  ή στον ποδοδιακόπτη με .

Ενεργοποιήστε το ποτηράκι με .



Η αναρρόφηση ενεργοποιείται αυτόματα με την άρση των σωλήνων από τις θέσεις τους.

Λειτουργία του **ΧΟ 4 Προβολέα** από τον οπτικό αισθητήρα κάτω από την κεφαλή του.


Κρατήστε το χέρι σας στο πεδίο ενεργοποίησης του αισθητήρα για λιγότερο από 1" και ο προβολέας ανοίγει/κλίνει. Κρατήστε το χέρι σας περισσότερο για αλλαγή έντασης του φωτός.


Με το  **ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο κουδούνι.**

## Έδρα και Καρέκλα


Φέρετε την **ΧΟ 4 Καρέκλα** στη θέση 1 με  και στη θέση 2 με .

Με ένα πάτημα  πηγαίνει σε θέση ξεπλύματος.

Με δεύτερο πάτημα  πηγαίνει στην μηδενική θέση.

Αν  πατηθεί δυο φορές σε λιγότερο από 1" η καρέκλα πηγαίνει σε μηδενική θέση.

Πηγαίνετε στη προηγούμενη θέση με .


Επείγων ακινητοποίηση καρέκλας: Σταματήστε την καρέκλα άμεσα εν κινήσει με οποιοδήποτε πλήκτρο του ΧΟ Ποδ/πητή ή Χειριστηρίου (εκτός .




 και  διακόπτες



Αισθητήρας φως

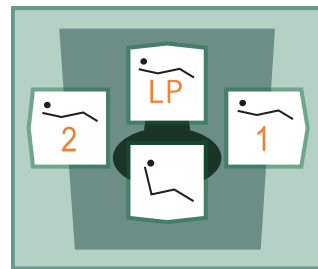

ΧΟ Χειριστήριο στη βάση της καρέκλας

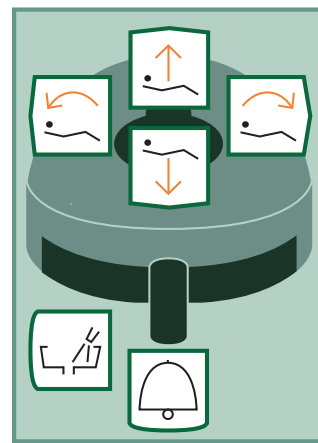




ΧΟ Ποδοδιακόπτης

-  Θέση 1
-  Θέση 2
-  Μία: Ξέβγαλμα  
Δuo: Μηδενική
-  Τελευταία Θέση
-  Ανέβασμα
-  Κατέβασμα
-  Πλάτη: μπροστά
-  Πλάτη: πίσω
-  Κουδούνι
-  Πτυελοδοχείο
-  Ποτηρί

## Μοτέρ



**Τραβήξτε το μοτέρ μπροστά** και ελέγξτε το με τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.


Λειτουργήσετε το με την φορά των δεικτών του ρολογιού με  και αντίθετα με  εύρος 250 - 40,000 σ.α.λ.

Αλλάξτε την επιλογή του σπρέι: νερό & αέρας, μόνο αέρας ή όχι σπρέι με .

## Τουρμπίνα



**Τραβήξτε την τουρμπίνα μπροστά** και ελέγξτε την με τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.



Ξεκινήσετε/σταματήσετε την τουρμπίνα με  ή .

Αλλάξτε την επιλογή του σπρέι: νερό & αέρας ή όχι σπρέι με .

## Υπέρηχος



**Τραβήξτε τον υπέρηχο μπροστά** και ελέγξτε την με τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.

Ξεκινήσετε/σταματήσετε την ταλάντωση του υπέρηχου με  ή .

Διαλέξτε 3 επίπεδα ταλάντωσης:  
Αυξήσετε επίπεδο   
Μειώσετε επίπεδο .

Δείτε το παρών επίπεδο ταλάντωσης στην οθόνη:

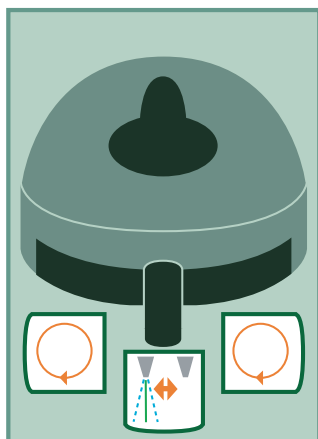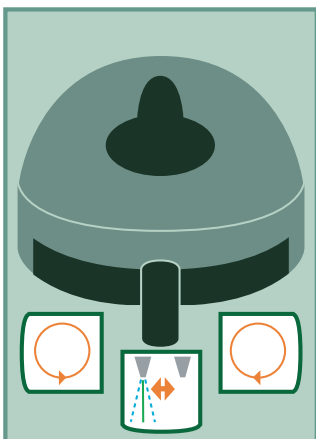

 Ελάχιστο  
 Μεσαίο  
 Μέγιστο



## Φωτοπολυμερισμός

**Τραβήξτε τον φωτοπολυμερισμό μπροστά** και ελέγξτε την με τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη.

Ο προκαθορισμένος χρόνος έκθεσης είναι 20".

Αρχίστε το φωτοπολυμερισμό με  ή .


Ακούγεται ένα ήχος μπιπ μετά από κάθε 10".

## Ενδοστοματική Κάμερα



Σε αντίθεση με όλα τα άλλα κοπτικά εργαλεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενδοστοματική κάμερα σε συνδυασμό και με άλλο εργαλείο.

**Τραβήξτε την κάμερα μπροστά** και θα δείτε την εικόνα στην οθόνη.

Ελέγχετε την κάμερα με τον ΧΟ Ποδοδιακόπτη όταν δεν είναι ενεργό άλλο εργαλείο.

Εναλλαγή μεταξύ «παγώματος» και «εικόνας» με .

Η επιλογή «παγώματος» προϋποθέτει και την εγκατάσταση σχετικού προγράμματος στον συνδεδεμένο Η/Υ.

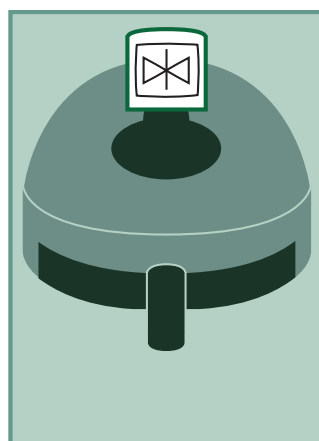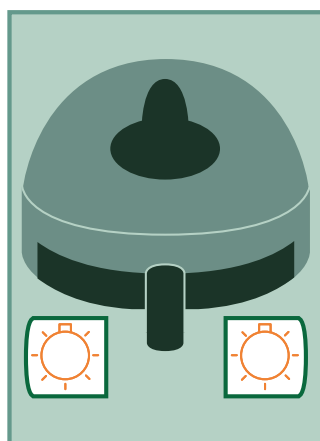

## Συντήρηση

## Ενέργειες Αντιβακτηριακού Ελεγχου

Αν ο ΧΟ Ποδοδιακόπτης γλιστράει στο πάτωμα όταν ενεργοποιείτε: Καθαρίστε της λαστιχένιες επαφές με βενζίνη.

### Το πρωί πριν τον πρώτο ασθενή



1. Τελειώστε τη διαδικασία καθαρισμού σωληνώσεων:
  - Ελέγξτε ότι τα εργαλεία βρίσκονται ακόμα στο πτυελοδοχείο
  - Ανοίξτε την έδρα
  - Αυτόματα οι σωληνώσεις νερού καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό
  - Ελέγξτε την παρούσα κατάσταση στην οθόνη

2. Τοποθετήστε αποστειρωμένα/νέα:
  - Λάστιχο εργαλείων
  - Κοπτικά εργαλεία
  - Ποτήρι
  - Χειρολαβές γέφυρας, προβολέα, οθόνης
  - Φίλτρα & ακροφύσια αναρροφήσεων

### Μετά από κάθε ασθενή

1. Αφαιρέστε μολυσμένα:
  - Κοπτικά εργαλεία
  - Λάστιχο εργαλείων
  - Ποτήρι
  - Χειρολαβές γέφυρας, προβολέα, οθόνης
2. Καθαρίστε και απολυμάνετε τις επιφάνειες
3. Προσαρμόστε αποστειρωμένα/νέα:
  - Λάστιχο εργαλείων
  - Κοπτικά εργαλεία
  - Ποτήρι
  - Χειρολαβές γέφυρας, προβολέα, οθόνης

### Το βράδι μετά το τελευταίο ασθενή

1. Απολύμανση αναρροφήσεων:
  - Ενεργοποίηση 
  - Τοποθετήστε τους σωλήνες στις υποδοχές
  - Ελέγξτε την παρούσα κατάσταση στην οθόνη
2. Αφαιρέστε μολυσμένα:
  - Κοπτικά εργαλεία
  - Λάστιχο εργαλείων
  - Πτυελοδοχείο, φίλτρο αμαλγάματος & βάση ποτηριού (στρέψτε την βάνα πριν αφαιρέσετε το πτυελοδοχείο)
  - Χειρολαβές γέφυρας, προβολέα, οθόνης
  - Φίλτρα & ακροφύσια αναρροφήσεων
3. Καθαρίστε και απολυμάνετε τις επιφάνειες & την ταπετσαρία της καρέκλας
4. Προσαρμόστε αποστειρωμένα/νέα:
  - Πτυελοδοχείο, φίλτρο αμαλγάματος & βάση ποτηριού (στρέψτε την βάνα μετά την τοποθέτηση του πτυελοδοχείου)
5. Αρχίστε την διαδικασία απολύμανσης σωληνώσεων νερού:
  - τοποθετήστε τα εργαλεία στην βάση στο πτυελοδοχείο
  - Πατήστε  για ν' αδειάσει το δοχείο
  - σβήστε την έδρα αφήνοντας τα εργαλεία στο πτυελοδοχείο



Σύστημα απολύμανσης σωληνώσεων νερού.



Σωλήνες αναρρόφησης προσαρμοσμένες στις υποδοχές απολύμανσης αναρροφήσεων.



Αφαίρεση πτυελοδοχείου



Μέρη ΧΟ 4 που κλιβανίζονται (134o)



Μέρη που καθαρίζονται στον θερμο-αποστειρωτή (90o)



Καθαρίζετε τις πλαστικές βάσεις του ΧΟ Ποδοδιακόπτη συχνά με βενζίνη

# XO<sup>®</sup>

XO CARE A/S  
Usserød Mølle  
DK 2970 Hørsholm  
Denmark  
+45 70 20 55 11  
info@xo-care.com  
www.xo-care.com